



FR & EN
Prophy Brochure 2017



DEPPELER®

SWISS DENTAL
MANUFACTURE 

L'excellence pour la prophylaxie
The excellence for the prophylaxis

La manufacture Suisse par excellence *The excellence of Swiss manufacture*



Créée en 1934, Deppeler SA est le leader en Suisse de la fabrication d'instruments dentaires. La société propose à travers le monde, une gamme de produits haut de gamme conçue en étroite collaboration avec les praticiens et professeurs. Créateur du M23®, produit phare reconnu partout dans le monde, Deppeler innove régulièrement afin de répondre aux besoins des professionnels. Dirigée par Diane Bonny, cette entreprise familiale emploie plus de 20 collaborateurs et conçoit ses produits dans le respect de la tradition Suisse selon un mode de fabrication manuel pour une précision optimale.

Pourquoi choisir Deppeler ?

- Efficacité des tranchants
- Qualité des matériaux utilisés
- Intelligence des formes
- Ergonomie et confort d'utilisation
- Haute sensibilité tactile

Founded in 1934, Deppeler SA is the leading Swiss manufacturer of dental instruments. Worldwide, the company offers a range of high-quality products developed in close collaboration with dental practitioners and academics. Creator of the M23®, the flagship product recognised around the world, Deppeler is constantly innovating in its quest to meet the needs of the dental profession. A family business, led by Diane Bonny and employing more than 20 staff, the company designs and hand-manufactures its products according to the best Swiss traditions in order to achieve optimum precision.

Why choose Deppeler ?

- Efficiency of the cutting edges*
- Quality of materials used*
- Intelligence of shapes*
- Ergonomics and comfort of use*
- High tactile sensitivity*



Sondes exploratrices


Grâce aux caractéristiques exceptionnelles de notre matière première, nos sondes ont une durée de vie inégalée. Chaque pointe est retouchée à la main pour garantir une finition parfaitement pointue.



> Pointu
Sharp



> Résistant et flexible
Resistant and flexible

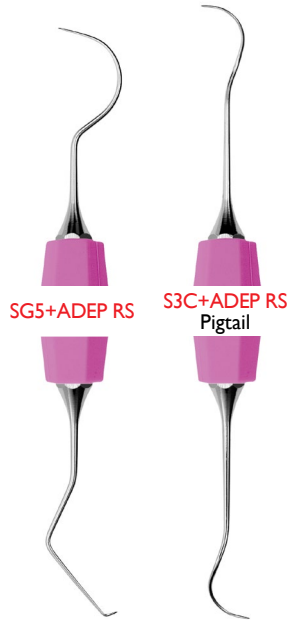

Explorers

Thanks to the unique characteristics of our raw material, our explorers have an unmatched lifetime. Each working end is hand-finished to guarantee a perfectly sharp tip.

Pour la recherche du tartre
sub-gingival

For pocket calculus detection
sub-gingival



Angulation Gracey 11/12

Angulation Gracey 11/12



Angulation Gracey 13/14

Angulation Gracey 13/14


Sondes parodontales

Periodontal probes




Sondes parodontales alliant flexibilité et résistance avec un marquage noir indélébile.

Periodontal probes which combine flexibility and resilience with an indelible pocket depth marking.

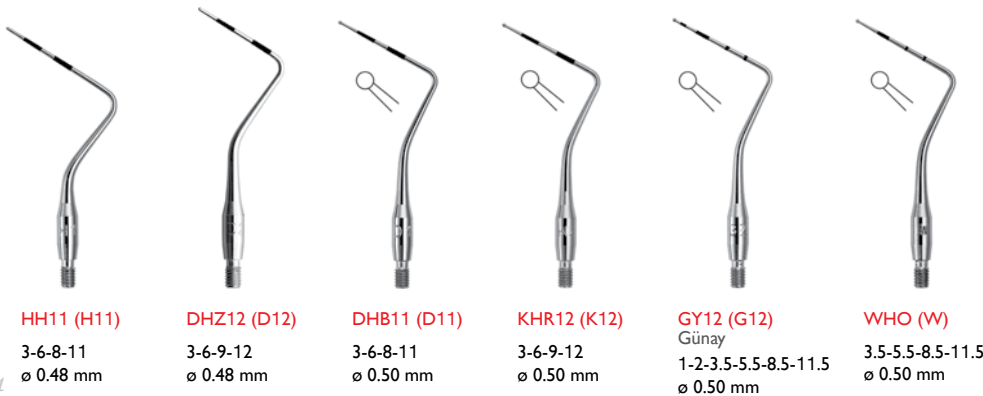

> Manche DMS en plastique vert ou noir.
Green or black DMS plastic handle.

Pointes à visser parfaitement arrondies
Perfectly rounded ends

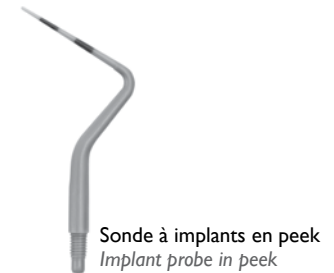

Ergonomie

Le manche CLEANext

La parfaite combinaison entre la précision de fabrication des instruments Deppeler et une ergonomie hors du commun, 100% hermétique.


Ergonomics

The CLEANext handle

The perfect combination of Deppeler precision manufacturing of instruments and outstanding ergonomics, 100% airtight.

“Their exceptional, hand-finished instruments have, thanks to their highest processing quality, a rarely long durability and give me a daily pleasure in my specialty practice.”

Praxis Dr. Jean-Pierre Ebner, Basel, Switzerland

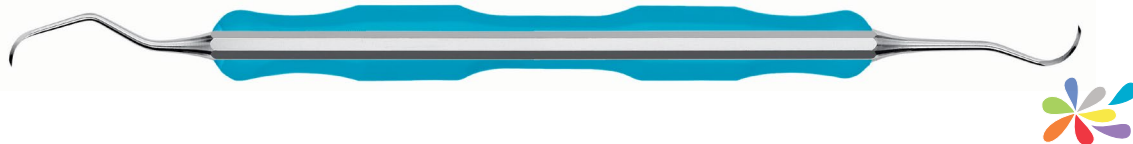

CLEANext^{technology}

Système de réponse directe:

- instrument monobloc (pas de pointe rapportée)
- permet de conserver une excellente sensibilité tactile
- forme hexagonale pour une meilleure ergonomie

Direct response system:

- single instrument piece (no inserted tip)
- makes it possible to keep an excellent tactile sensitivity
- hexagonal shape for better feel

Scalers

M23® & co.



Un seul instrument pour le traitement de tous les quadrants


A single instrument for the treatment of all quadrants



Versions fines:
Idéales pour accéder aux zones difficiles à traiter

Fine versions:
Ideal for accessing difficult areas

Secteur antérieur

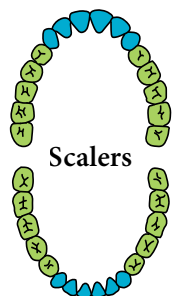

Scalers

Droit
Straight

PY51ZCN



parfaite angulation pour le traitement des zones labiales et linguales

perfect angulation for the debridement of labial and lingual areas

Droit et fin
Straight and fine

PY51ZFCN



version fine du PY51Z

fine version of the PY51Z

Droit
Straight

ZI11CN



lame légèrement plus large et plus rigide que PY51Z

slightly larger and more rigid than PY51Z

Faucille
Sickle scaler



H6H7CN



forme classique particulièrement efficace pour les zones proximales

classic form, very effective for approximal areas

Faucille
Sickle scaler



M15CN



faucille plus ouverte que H6H7

more open sickle than H6H7

Mini faucille
Mini sickle scaler



AP67CN



faucille plus fine et plus petite que H6H7, angulation plus prononcée

smaller and thinner sickle than H6H7, more pronounced angulation

Droit
Straight



H533CN



détartré fin combinant faucille et Jacquette

thin sickle scaler combined with a fine Jacquette

Droit
Straight



HP551CN



combinaison faucille et PY51Z, élaborée pour l'école supérieure d'hygiénistes dentaires de Genève

combination of straight sickle scaler and PY51Z, made for the Geneva superior dental hygienists school

Droit
Straight



PY151CN




lame miniature pour le détartrage d'une dentition dense avec des dents qui se chevauchent, couplé à PY51Z

mini blade for scaling crowded or overlapping teeth, paired with a PY51Z

Prémolaires-Molaires

Posteriors

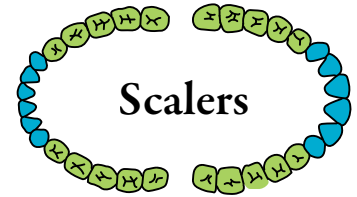

pour surfaces approximales

for approximal surfaces



M21CN



version fine du M21
pour les espaces approximaux
particulièrement étroits

*fine version of the M21
to reach the very thin approximal
spaces*



M21FCN



pour surfaces approximales, lames
plus épaisses que M21

*for approximal surfaces, thicker
blades than M21*



RZ11LCN



accès facilité aux zones approxi-
males des dernières molaires

*easier access to approximal areas of
the last molars*



AD33CN



Mc Call 14/13 pour les zones
approximales

*Mc Call 14/13 for approximal
access*



14SPY13SCN



Curettes universelles


Traitement des furcations en deux étapes

Universal curesttes

Clean furcations in 2 steps


1. Curetage avec les curettes F10 ou F11 selon la taille de la furcation (voir images).

1. Curettage with the curesttes F10 or F11 depending on the size of the furcation (see pictures).

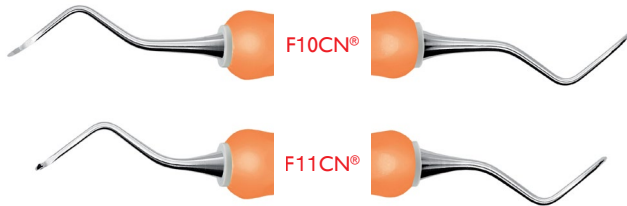

2. Lissage avec curettes diamantées F12 ou F13 selon l'anatomie de la furcation. Le diamantage extra-fin évite la re-colonisation des bactéries.

2. Smoothing with diamond coated curesettes F12 or F13 depending on the anatomy of the furcation. Very fine diamond grain avoids bacteria re-colonization.

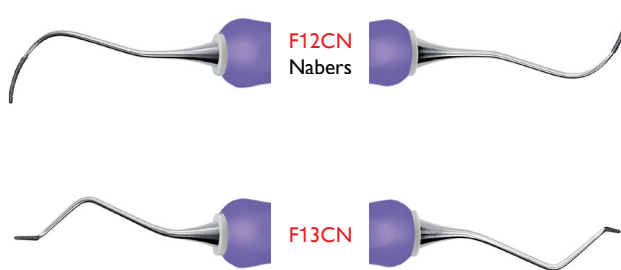

Secteur antérieur

Anteriors



GX4CN



angulation optimale pour antérieures et prémolaires

optimal angulation for anteriors and premolars



GX4SCN



version fine du GX4

fine version of the GX4



GE22CN



curette droite et fine élaborée pour l'école supérieure d'hygiénistes dentaires de Genève

straight and fine curette made for the Geneva superior dental hygienists school



GX3CN



curette rigide

rigid blade



GX6CN











houe


hoe

Prémolaires-Molaires

Posteriors

0.95 mm		TI23ACN	accès facilité aux zones approximales des dernières molaires	<i>easier access to approximal areas of the last molars</i>
0.80 mm		TI23ASCN	version fine du TI23A	<i>fine version of the TI23A</i>
0.80 mm		ZI15SSCN	faucille fine	<i>fine sickle</i>
1.0 mm		ZI15SCN	faucille moyenne	<i>medium sickle</i>
1.2 mm		ZI15CN	faucille forte	<i>strong sickle</i>
0.80 mm		1MY2CN	curettes universelles de Langer pour molaires et prémolaires	<i>Langer universal curettes for posteriors</i>
0.80 mm		3MY4CN		
0.80 mm			- maxillaire	- maxillary
1.3 mm		GX5CN	houe	<i>hoe</i>

easy
sharp device

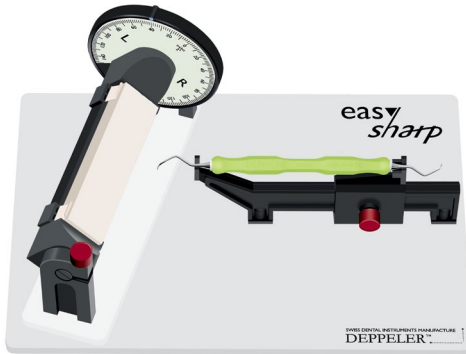

La perfection de l'aiguisage

Angles et mouvements de ré-aiguisage spécifiques à chaque instrument

+ Affûtage le long du tranchant

= Tranchant neuf (comme sorti d'usine)

ESD Standard


livré avec 2 pierres ceramic
delivered with 2 ceramic stones

ESDPLUS

livré avec 2 pierres Arkansas
delivered with 2 Arkansas stones

ESP Premium

ESDPLUS + ESCPLUS + OIL + TEST
STICKS + LOUPE

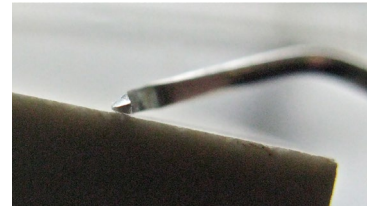


The perfection of sharpening process

Re-sharpening angles and movements are established specifically to each instrument

+ Sharpening occurs along the cutting edge

= New cutting edge (as from the factory)

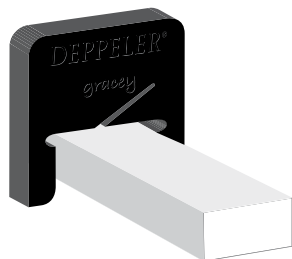

ESC
contient 2 coachs et 1 pierre ceramic
contains 2 coaches and 1 ceramic stone



ESCPUS
contient 2 coachs et 1 pierre Arkansas + ESS4 (pour curettes en titane)
contains 2 coaches and 1 Arkansas stone + ESS4 (for titanium curettes)



La solution universelle

Affûtage le long du tranchant avec maîtrise de l'angle

+ Angulations universelles

= Idéal pour les instruments de toutes les marques

The universal solution

Sharpening along the cutting edge with control of the angle

+ Universal angulations

= Suitable for all brands

Logistique et hygiène

Nos cassettes de stérilisation permettent une organisation des instruments sécurisée et répondent aux plus hautes exigences en matière d'hygiène:

- absence de charnières
- instruments maintenus mais non bloqués (fig. 1)
- ouverture aux quatre coins (fig. 2)
- désinfection de 100% de la surface des instruments grâce à une totale perméabilité



fig.1



fig.2

Logistics and hygiene

Our sterilization cassettes allow for secure organisation of the instruments and meet the highest hygiene standards :

- *no hinges*
- *the instruments are maintained but not blocked (fig.1)*
- *fully open corners (fig. 2)*
- *disinfection of 100% of the instruments' surface thank to total permeability*



CLEANEXT B15

15 instruments & espace supplémentaire
15 instruments & extra space



CLEANEXT B10

10 instruments
10 instruments



CLEANEXT B5

5 instruments
5 instruments

Kits de prophylaxie disponibles en 3 versions de manches

Prophylaxis kit

> KITPROPHYCN

SG5 Explorer
H6H7CN Scaler Anteriors
M21CN Scaler Posteriors
M23CN® Scaler Universal
MIR-DDMS-N Double Mirror
CLEANextB5



*Prophylaxis kits available
with 3 types of handles*



Furcations treatment kit

> KITFURCACN

ZA3 Furcation probe (3-6-9-12)
F10CN Universal curette
F11CN Universal curette
F12CN Diamond-coated curette
F13CN Diamond-coated curette
CLEANextB5

Autres kits disponibles sur www.deppeler.ch ou dans le catalogue complet

Other kits available on www.deppeler.ch or in the complete catalogue

Informations de commande

Order information


CN



Ref : instrument CN, exemple M23CN



ADEP

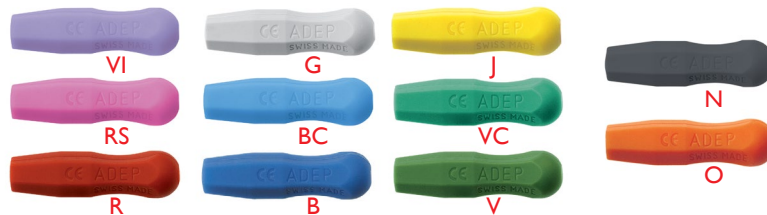

Libre choix de la couleur

Free choice of colors

Ref : instrument + ADEP, exemple M23+ADEP couleur/color

Original



Ref : instrument, exemple M23

www.deppeler.ch

