



DEPPELER

Signature of excellence

SOLUZIONI
DI AFFILATURA




PERCHÉ SCEGLIERE STRUMENTI CHE POSSONO ESSERE AFFILATI

Uno studio ha testato e comparato strumenti Deppeler e strumenti che non possono essere riaffilati. I risultati mostrano come, dopo 1000 passaggi su dentina e cinque cicli di riprocessamento, tutti gli strumenti hanno perso circa il 75% della loro efficacia.

In questa fase, se il professionista utilizza uno strumento che non può essere riaffilato, lo strumento smussato continuerà a perdere la sua efficienza.

Se il professionista utilizza uno strumento Deppeler, la tagliente può essere riaffilata per ripristinare l'ottimale capacità di taglio e comfort.

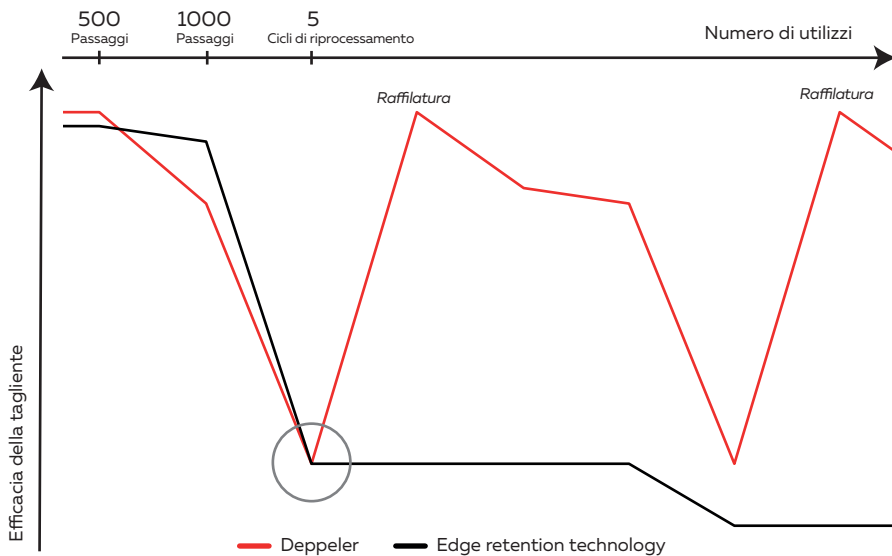

Schmidlin et. al.: In vitro evaluation of 3 cures with edge retention technology after extended use. SSO Journal 119: 1200-1207. (12/2009)

■ Flessibilità

Le parti lavoranti di uno strumento riaffilabile sono più flessibili e meno suscettibili a rottura nella bocca del paziente.

■ Efficienza

Un profilo della lama in acciaio nudo è più efficiente di uno rivestito.

■ Risparmio

Gli strumenti riaffilabili devono essere sostituiti meno frequentemente. Il loro costo è inferiore nel lungo termine.

■ Sostenibilità

Oltre a dover essere acquistati meno frequentemente, gli strumenti interamente in acciaio sono anche più facili da riciclare.

METODI DIE AFFILATURA

Mantieni le taglienti di scaler e curette fino alla fine del loro ciclo di vita. Con le infallibili soluzioni Deppeler Easy Sharp, potrai affilare i tuoi strumenti facilmente ed efficacemente, senza sfaccettature, bordi seghettati o sbavature.


easy
sharp

MANUALE

Pietre naturali



Arkansas Hard Black
ESS1
Affilatura
standard

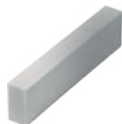

Arkansas Traslucent
ESS3A
Superiore qualità
per un'affilatura
più rapida e risultati
migliori



Carburo di Silicio
ESS4
Per strumenti in titanio
e strumenti
in acciaio molto smussati



CON UN AUSILIO VISIVO

Easy Sharp Coach

ESC

Progettato per avere una guida visiva e un facile controllo dell'angolo di affilatura. 1 coach per curette e scaler universali, 1 coach specifico per curette Gracey. Adatto a tutte le marche di strumenti.

Come si usa un
Easy Sharp Coach?



CON UNA MACCHINA

Easy Sharp Device

ESD

Progettato per la massima precisione dell'angolo di affilatura e il controllo ottimale del movimento. La tagliente sembra nuova di zecca, tornata al suo stato originale.

Adatto alla strumentazione Deppeler.

Come si usa un
Easy Sharp Device?



Informazioni per l'ordine

EASY SHARP COACH

ref. ESC

include:

- 2 coaches (1 universale e 1 Gracey)
- 1 pietra Arkansas Hard Black ESS1

ref. ESCPLUS

include:

- 2 coaches (1 universale e 1 Gracey)
- 1 pietra Arkansas traslucente ESS3A

EASY SHARP DEVICE

ref. ESD

include:

- Device
- 1 pietra Arkansas Hard Black ESS1

ref. ESDPLUS

include:

- Device
- 1 pietra Arkansas traslucente ESS3A

Ti consigliamo di riaffilare i tuoi strumenti
una volta ogni 5-8 trattamenti.



WWW.DEPPERLER.CH

f DEPPELERSA | @ DEPPELER_INSTRUMENTS



DEPPERLER

Signature of excellence